

PATIËNTEN INFORMATIE

V.A.C.-therapie

Wondbehandeling

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Wondbehandeling met behulp van V.A.C.-therapie

In deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over de wondbehandeling met behulp van V.A.C.-therapie. Wij adviseren u de informatie zorgvuldig te lezen. Eventuele aanvullingen zullen altijd door uw behandelend arts worden meegegeeld.

Wat is V.A.C.-therapie?

Bij u is een V.A.C.-therapie voorgeschreven om de genezing van uw wond te bevorderen. V.A.C. is de afkorting van Vacuum Assisted Closure. Bij deze behandeling zorgt een pomp voor een bepaalde onderdruk (vacuüm) op de plaats van de wond. Hierdoor wordt overtollig wondvocht afgevoerd naar een opvangbeker (canister). Deze therapie bevordert zowel de bloedcirculatie als vermindering van de zwelling, waardoor de wond sneller geneest.

De werking van het V.A.C.-therapiesysteem

Het V.A.C.-therapiesysteem bestaat uit:

- een therapie-unit met een pomp, die door een computer wordt bestuurd;
- een opvangbeker (canister);
- een steriele plastic slang;
- een spons;
- een doorzichtig folieverband.

De spons wordt op of in de wond aangebracht en vervolgens afgedekt met een folieverband. Het ene uiteinde van de slang wordt op het wondverband aangesloten en het andere uiteinde van de slang wordt verbonden met de opvangbeker die in de V.A.C.-unit is geplaatst.

Duur van de therapie

De duur van de V.A.C.-therapie hangt af van de soort wond, de ernst van de wond, het genezingsvermogen van het lichaam en het gewenste resultaat.

Pijnervaring van de therapie

Patiënten die V.A.C.-therapie krijgen, geven aan een licht trekkend gevoel te ervaren op de plaats van de wond. Dit gevoel verdwijnt ongeveer 10 tot 15 minuten na de start van de therapie. Deze ervaring kan echter per patiënt verschillen. Indien nodig kunt u uw behandelend arts of verpleegkundige altijd om advies vragen over pijnverlichting.

Verband wisselen

Hoe vaak het verband moet verwisseld worden hangt af van de soort wond, de grootte en de plaats van de wond. Meestal is de verbandwissel twee keer per week.

Uw behandelend arts of verpleegkundige bespreekt samen met u het juiste verbandwisselschema.

Bewegingsmogelijkheden tijdens de V.A.C.-therapie

Of u mag lopen tijdens de V.A.C.-therapie hangt af van de plaats van de wond en uw lichamelijke toestand. Vraag u behandelend arts of verpleegkundige wat de mogelijkheden zijn.

De V.A.C.-unit werkt op een accu, die maximaal acht uur zonder stroom kan. Aan te raden is als u in bed ligt of op een stoel zit de accu op te laden via het stroomnet.

Naar huis

Als uw behandelend arts het medisch verantwoord vindt, kunt u met V.A.C.-therapie naar huis. De verpleegkundige regelt samen met de transferverpleegkundige de materialen en de hulp bij de wondzorg thuis (thuiszorg).

In het ziekenhuis heeft u een vrij grote V.A.C.-unit aan uw bed hangen. Wanneer u naar huis gaat krijgt u een ActiV.A.C.-unit met een handig tasje.

Acti V.A.C.®




Raadpleeg de ActiV.A.C.® gebruikershandleiding en de folder met veiligheidsinformatie, voor verdere informatie voor de bediening van de ActiV.A.C.® unit.



Patient Mode
Jun 22 2007
15:38

Modus indicator
Huidige datum
Huidige tijd

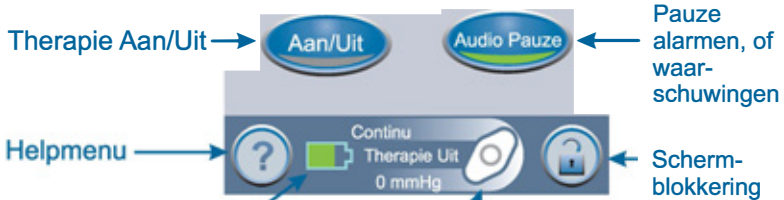

Deze pictogram draait, wanneer de ActiV.A.C.® Therapy unit negatieve druk toepast.

Starten met V.A.C.[®] Therapy

Druk  2 seconden om het systeem in/ uit te schakelen.

Druk  om de V.A.C.[®] Therapy te starten of beëindigen.

 Een groen oplichtende balk op de Aan/Uit knop geeft aan dat therapie actief is.

Opvangbeker verwijderen

- Druk op de hendel van de opvangbeker om deze los te maken.
- Verwijder de opvangbeker en deponeer deze volgens de richtlijnen.

Opvangbeker installeren

- Bevestig de opvangbeker aan de unit.
- Druk de opvangbeker stevig vast, totdat een duidelijke klik hoorbaar is.



Alarmen en waarschuwingen

Druk  voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere details.

In geval van nood, neem alstublieft contact op met uw zorgverlener of uw behandelend arts.

Dit is geen uitgebreide gebruiksaanwijzing. Voor aanvullende informatie met betrekking tot het gebruik van het ActiV.A.C.[®] systeem, raadpleeg uw ActiV.A.C.[®] gebruikershandleiding en neem contact op met uw zorgverlener, behandelend arts, of KCI Medical B.V.

 **KCI USA, INC.**
San Antonio, Texas 78219 USA
www.kci1.com



EC REP

KCI Medical Products (UK), Ltd.
Wimborne, Dorset
BH21 7SH
United Kingdom
www.kci-medical.com

Trademarks designated herein are proprietary to KCI Licensing, Inc. and its affiliates. Trademarks designated with the "®" symbol are registered in at least one country where this product is commercialized, but not necessarily in all such countries. The V.A.C.[®] System is patented and/or subject to pending patent.
©2007 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. 340091-05 Rev A 07/07

CE
0473

Wat te doen bij problemen

Bij problemen met de pomp, bijvoorbeeld als het alarm niet ophoudt, kunt u firma Bosman bellen, telefoon: 0800-0662.

Bij overige problemen neemt u contact op met de (wijk-)verpleging zodat deze zo nodig contact kan opnemen met de behandelend arts of de wondconsulent of uw verpleegafdeling van het ziekenhuis.

Voorbeelden van problemen zijn:

- de kleur van de vloeistof in de opvangbeker van de pomp verandert.
- als u overmatige bloeding onder de folie, in de slang of in de opvangbeker ziet.
- u merkt dat de wondomgeving roder wordt en gaat ruiken.
- u krijgt meer pijn.
- de V.A.C.-unit is meer dan twee uur uitgeschakeld.
- Voor meer informatie verwijzen we u naar de handleiding van de V.A.C.-unit.

Bestellen van materialen

Vanuit het ziekenhuis wordt de V.A.C.-unit aangesloten.

U krijgt dan een opvolgpakket met drie sponzen en drie opvangbekers mee naar huis. Thuis kunt u de firma Bosman bellen om een volgende V.A.C.-unit te bestellen, telefoon: 0800-0662.

Bij het eerst volgend polibezook bij de wondconsulent neemt u de volgende materialen mee:

- V.A.C.-unit;
- sponspakket;
- opvangbeker (canister);
- doosje met Duoderm E;
- zo nodig ander wondmateriaal als u dit op dat moment gebruikt.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of aan de (wijk-) verpleging.

U kunt ook contact opnemen met de wondconsulenten. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via (010) 291 23 99

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

