




Afnamekaart Medische Microbiologie



Vacutainer buis voor urinediagnostiek *(afgenomen met behulp van afnamesysteem)*

Voor alle bacteriële, gist en schimmel kweken, TB diagnostiek, PCR bepalingen en Legionella/Pneumokokken sneltest. Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.

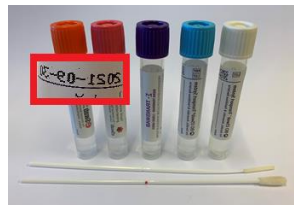

eSwab voor diverse uitstrijken, bv. genitaalkweken, (brand)wonden, ogen, blaasjesvocht etc.


Voor alle bacteriële, gist en schimmel kweken, PCR bepalingen en virologische bepalingen. Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.

(Alle afgebeelde kleuren zijn geschikt voor bovenstaande bepalingen)



Steriele transport swab (Transystem)

Verplicht afnamemedium voor alle onderzoeken op BRMO en MRSA. Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.

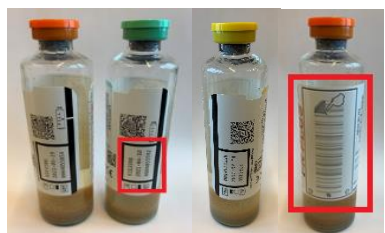

Bloedkweekflesjes

Verplicht afnamemedium voor bacteriële kweken van bloed en steriele punctaten. Bewaren bij kamertemperatuur. Zo snel mogelijk inleveren bij het laboratorium.

Volwassenen: Groen en oranje flesjes

Kinderen: Geel flesje

Ordersticker graag plakken op aangegeven plek!

Graag letten op de houdbaarheidsdatum van de afnamematerialen. Indien deze vermeld is staat deze op de foto aangegeven met een **rood** vakje
Voor meer informatie zie de pagina van de Medische Microbiologie op de website van het Maasstadziekenhuis of bel (010) 291 14 75



Afnamekaart Medische Microbiologie



Fecespotje

Voor alle parasitologie bepalingen, feceskweken, PCR bepalingen en virologische bepalingen.
Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.



Steriele container voor vloeibare materialen, respiratoire materialen, infuuslijnen, weefsels, sperma en lichaamsvreemd materiaal

Voor alle bacteriële, gist en schimmel kweken, TB diagnostiek, PCR bepalingen en virologische bepalingen.
Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.



Enveloppe voor schilfers, haren en nagels

Voor alle schimmel kweken.
Bewaren op kamertemperatuur. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.



Steriele liquor buis

Verplicht afnamesysteem voor alle bacteriële, gist en schimmel kweken, TB diagnostiek, PCR bepalingen en virologische bepalingen op liquor.
Bewaren bij 2-8 graden. Binnen 24 uur na afname inleveren bij het laboratorium.

*Graag letten op de houdbaarheidsdatum van de afnamematerialen. Indien deze vermeld is staat deze op de foto aangegeven met een **rood** vakje
Voor meer informatie zie de pagina van de Medische Microbiologie op de website van het Maasstadziekenhuis of bel (010) 291 14 75*



Afnamekaart Medische Microbiologie



VTM medium voor Keel/Naso uitstrijken COVID

Geschikt voor alle diagnostiek op SARS en eventuele andere virologische respiratoire bepalingen.

Bewaren bij 2-8 graden.

Zo snel mogelijk inleveren bij het laboratorium.



PPT buis voor bloed

Voor PCR bepalingen (HIV/HBV/HCV viral load).

Bewaren bij kamertemperatuur.

Buis moet binnen 2 uur na afname op het lab te zijn.



EDTA-buis voor bloed en beenmerg

Voor malaria diagnostiek (**meteen naar het lab!**), PCR bepalingen (behalve HIV/HBV/HCV viral load) en TB diagnostiek
Bewaren bij kamertemperatuur.

Voor overige aanvragen dient de buis binnen 2 uur na afname op het lab te zijn.



Serumbuis voor bloed


Voor infectieserologie.

Bewaren bij kamertemperatuur.

*Graag letten op de houdbaarheidsdatum van de afnamematerialen. Indien deze vermeld is staat deze op de foto aangegeven met een **rood** vakje
Voor meer informatie zie de pagina van de Medische Microbiologie op de website van het Maasstadziekenhuis of bel (010) 291 14 75*



Afnamekaart Medische Microbiologie

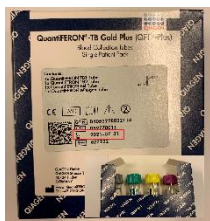

QuantiFERON®-TB Gold Plus voor bloed

TB diagnostiek op bloed.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Na afname meteen versturen naar laboratorium!

*Graag letten op de houdbaarheidsdatum van de afnamematerialen. Indien deze vermeld is staat deze op de foto aangegeven met een **rood** vakje
Voor meer informatie zie de pagina van de Medische Microbiologie op de website van het Maasstadziekenhuis of bel (010) 291 14 75*